


Fjern ikke disse oplysninger fra dispenserboksen.

Gallant Disposable Prep Razor kommer i en praktisk dispenserboks indeholdende 50 x cover-beskyttede barberskraber.



- Fingerspidskontrol gennem grebskanter på håndtaget.
- Håndtaget er placeret foran klingen og kræver kun et blidt træk.
- Optimalt udsyn til barberområdet.
- PTFE og CrN-belagt barberblad.
- Barberbladshovedet er specielt udviklet til et glat snit.

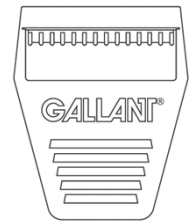

FORSIGTIG – Indeholder skarpe barberblade.



Brugsanvisning:

1. Træk forsigtigt beskyttelsesdækslet af.
2. Placer barberskraberen over det udpegede barberområde. Udsæt ikke noget pres. Flyt forsigtigt skraberen hen over huden.
3. Til bortskaffelse skal du holde barberskraberen oprejst mod en flad overflade og forsigtigt trykke, indtil håndtaget klikker. Barberskraberen er sikkert deaktiveret.
4. Håndtaget kan genbruges, og barberbladshovedet kan kasseres i en medicinsk sikkerhedsbeholder.



EU-overensstemmelseserklæring



Medicinsk udstyr.



UDI: 7391100000018.



Katalognummer: 120-354 / Dispenserboks med 50 enheder.



Serienummer dispenserboks.



Batch/ LOT nummer, se dispenserboks.



Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget.



Ikke till flergangsbrug. Må ikke genbruges.



Ikke-steril.



Fremstillingsdato. Se dispenserboks.



Anvendes inden. Se dispenserboks.



Opbevar din Gallant barberskrabe på et tørt sted.



Holdes væk fra sollys.



Temperaturbegrænsning. Opbevar mellem 5°C / 41°F - 30°C / 86°F.



Producent: Konsultbyrå Process Construction AB, Tågarpsvägen 2 27293 Tommarp, Sverige
www.gallant-sweden.com • vkl@gallant-sweden.com • ISO 13485 certificeret virksomhed

Gallant Disposable Prep Razor-registreringer af medicinsk udstyr:

- EU MDR klasse 1, EU SRN: SE-MF-000005617
- US Food and Drug Administration, reg.nr.: 3009143236
- MHRA UK reg.nr.: 2021121301226985
- Australia ARTG ID reg.no: 326611