


No elimine esta información del envase.

Gallant se suministra en una práctica caja dispensadora con 50 maquinillas de afeitar protegidas por una tapa protectora.

- Concisa control con las yemas de los dedos gracias a los surcos del mango.
- Mango colocado delante de la cuchilla que permite un deslizamiento suave.
- Óptima visión de la área afeitada.
- Cuchilla recubierta de PTFE y CrN.
- Bisel de hoja de afeitar especialmente diseñado para una incisión fina.

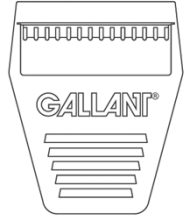

NOTA Contiene cuchillas de afeitar afiladas.



Información para el usuario:

1. Retire la protección de la cuchilla de afeitar como se muestra en la imagen.
2. Arrastre suavemente la cuchilla sobre la piel, no presione.
3. Después de utilizar, parta la afeitadora como se muestra en la imagen para imposibilitar su uso posterior.
4. Deposite la parte de la maquinilla de afeitar que contiene la cuchilla en un contenedor de desechos médicos.



Declaración de conformidad de la UE.



Producto médico.



UDI: 7391100000018



Número de catálogo de producto: 120-354 / Caja dispensadora 50 piezas.



Número de serie caja dispensadora.



Ver LOTE en el envase.



No utilizar si la caja está dañada.



No reutilice.



Sin esterilizar



Fecha de fabricación. Ver en el envase.



Fecha de caducidad. Ver en el envase.



Guarde la maquinilla de afeitar desechable Gallant en un lugar seco.



Mantener alejado de la luz solar.



Límites de temperature. Almacenar entre 5°C / 41°F - 30°C / 86°F.



Fabricante: Konsultbyrån Process Construction AB, Tågarpvägen 2 27293 Tommarp, Suecia
www.gallant-sweden.com • vkl@gallant-sweden.com • Empresa certificada ISO 13485

Maquinilla de afeitar desechable Gallant - producto médico registrado por:

- UE MDR Class 1, SRN: SE-MF-000005617
- US Food and Drug Administration, reg.no.: 3009143236
- MHRA UK Reg.No.: 2021121301226985
- Australia ARTG ID reg.no: 326611