


Nie usuwaj tych informacji z opakowania.

Gallant są dostarczane w wygodnym pudełku z dozownikiem zawierającym 50 szt. maszynek do golenia zabezpieczonych osłoną.

- Precyzyjne prowadzenie opuszkami palców dzięki grzbietom na uchwycie.
- Rękojeść umieszczona przed ostrzem, wymagająca jedynie delikatnego pociągnięcia.
- Optymalny widok obszaru golenia.
- Żyłka pokryta PTFE i CrN.
- Fasetka ostrza żyłki opracowana specjalnie do gładkiego cięcia.

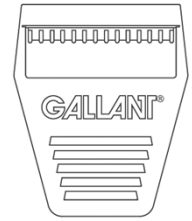

UWAGA Zawiera ostre żyłki.



Informacje dla użytkownika:

1. Usuń osłonę ostrza maszynki w sposób pokazany na rysunku.
2. Delikatnie przeciągnij ostrze po skórze, nie przyciskaj.
3. Po użyciu złam golarkę w sposób pokazany na rysunku, aby uniemożliwić jej ponowne użycie.
4. Część maszynki zawierającą ostrze umieść w pojemniku na odpady medyczne.



Deklaracja zgodności UE.



Wyrób medyczny.



UDI: 7391100000018



Numer katalogowy produktu: 120-354 / Pudełko z dozownikiem 50 sztuk.



Numer seryjny opakowania.



Zobacz LOT na opakowaniu.



Nie używać, jeśli pudełko jest uszkodzone.



Nie używaj ponownie.



Niesterylny.



Data produkcji, patrz na opakowaniu.



Data ważności, patrz na opakowaniu.



Przechowuj jednorazową maszynkę Gallant w suchym miejscu.



Przechowywać z dala od światła słonecznego.



Limit temperatury. Przechowywać między 5°C / 41°F - 30°C / 86°F.



Producent: Konsultbyrån Process Construction AB, Tågarpvägen 2 27293 Tommarp, Szwecja.
www.gallant-sweden.com • vkl@gallant-sweden.com • ISO 13485 certyfikowana firma.

Jednorazowa maszynka do golenia Gallant - wyrób medyczny zarejestrowany przez:

- EU MDR Class 1, SRN: SE-MF-000005617
- US Food and Drug Administration, reg.no.: 3009143236
- MHRA UK Reg.No.: 2021121301226985
- Australia ARTG ID reg.no: 326611

Nie stosować ponownie u innych pacjentów. Ryzyko skażenia krzyżowego i infekcji.
Wszelkie poważne zdarzenia, które miały miejsce w związku z produktem należy zgłosić producentowi.