

Bitte entfernen Sie diese Information nicht von der Dispenser-Box

Gallant Rasierer sind in einer Dispenser-Box verpackt, 50 Stk/Box.

- Griffsicher.
- Der Griff befindet sich vor der Klinge und erfordert nur eine leichte Bewegung über die Haut.
- Optimale Sicht über den Rasierbereich.
- PTFE und CrN beschichtete Rasierklinge für eine glatte und gleichmäßige Rasur.
- Speziell entwickelte Rasierklinge garantiert eine effektive Rasur.




Informationsbeilage beachten. Vorsicht – Enthält Rasierklingen



Gebrauchsanweisung:

1. Ziehen Sie den Abdeckschutz vorsichtig ab.
2. Legen Sie den Rasierer über den Rasierbereich. Verwenden Sie keinen Druck. Bewegen Sie den Rasierer sanft über die Haut.
3. Halten Sie den Rasierer nach Gebrauch aufrecht gegen eine flache Oberfläche und drücken Sie vorsichtig, bis der Griff bricht. Der Rasierer ist jetzt unbrauchbar.
4. Der abgebrochene Griff kann recycelt werden und der Rasierklingenkopf in einem medizinischen Sicherheitsbehälter entsorgt werden.

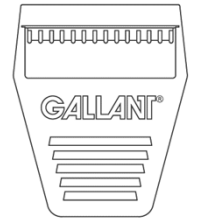

EU-Konformitätserklärung



Medizinprodukt



Eindeutige Geräteerkennung UDI: 73911000000018



Bestellnummer: 120-354 / Dispenser Box mit 50 Rasierer



Seriennummer Dispenser Box. Bitte beachten Sie der Dispenser-Box.



Chargenbezeichnung. Bitte beachten Sie der Dispenser-Box.



Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt.



Nicht zur Wiederverwendung.



Unsteril.



Herstellungsdatum. Bitte beachten Sie der Dispenser-Box.



Verwendbar bis. Bitte beachten Sie der Dispenser-Box.



Bewahren Sie die Rasierer an einem trockenen Ort.



Vor Sonnenlicht schützen.



Temperaturbegrenzung. Zwischen 5°C / 41°F – 30°C / 86°F halten.



Hersteller: Konsultbyrån Process Construction AB, Tågarpsvägen 2 27293 Tommarp, Schweden
www.gallant-sweden.com • vkl@gallant-sweden.com • ISO 13485 zertifiziertes Unternehmen

Gallant Disposable Prep Rasierer Medizinprodukt Registrierungen:

- EU MDR class 1, EU SRN: SE-MF-000005617
- US Food and Drug Administration, reg.no.: 3009143236
- MHRA UK Reg.No.: 2021121301226985
- Australia ARTG ID reg.no: 326611
- Italy NSIS RDM no. 2887426
- NATO stock no. NSN 6515640021832
- GMDN: 37520

Nicht bei anderen Patienten wiederverwenden. Risiko einer Kreuzkontamination und Infektion.
Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt sollte dem Hersteller gemeldet werden.