


Non rimuovere queste informazioni dal dispenser.

Il Rasoio Monouso Gallant per la tricotomia viene fornito in una comoda scatola dispenser, contenente 50 rasoi per la preparazione, protetti da copertura.

- Controllo con la punta delle dita grazie alle scanalature di presa sull'impugnatura.
- Impugnatura posizionata davanti alla lama, che richiede solo una leggera trazione.
- Visualizzazione ottimale dell'area di rasatura.
- Lama del rasoio rivestita in PTFE e CrN.
- Sfaccettatura della lama del rasoio appositamente sviluppata per un taglio liscio.

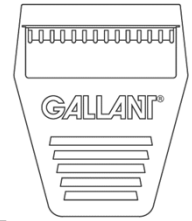

ATTENZIONE – Contiene lame di rasoio affilate.



Istruzioni per l' Uso:

1. Estrarre delicatamente la copertura protettiva.
2. Posiziona il rasoio sull'area di rasatura designata. Non applicare alcuna pressione. Muovere delicatamente il rasoio sulla pelle.
3. Per lo smaltimento, tenere il rasoio in posizione verticale contro una superficie piana e premere delicatamente finché la maniglia non scatta. Il rasoio è disabilitato in modo sicuro.
4. Il manico può essere riciclato e la testa della lama del rasoio può essere smaltita in un contenitore di sicurezza medica.



Dichiarazione di conformità.



Dispositivo Medico.



UDI: 73911000000018



Codice prodotto commerciale: 120-354 / Dispenser Box con 50 unità .



Numero di serie Dispenser box, vedere confezione.



Batch/ LOTTO, vedere confezione.



Non Utilizzare se danneggiato.



Non riutilizzare.



Non sterile.



Data di produzione, vedere confezione.



Data di scadenza, vedere confezione.



Conservare il rasoio usa e getta Gallant in un luogo asciutto.



Conservare lontano dai raggi solari.



Limite di temperatura. Mantenere tra 5°C / 41°F - 30°C / 86°F.



Produttore: Konsultbyrån Process Construction AB, Tågarpsvägen 2 27293 Tommarp, Svezia.
www.gallant-sweden.com • vkl@gallant-sweden.com • ISO 13485 certified company

Registrazioni dei dispositivi medici Gallant Disposable Prep Razor:

- EU MDR class 1, EU SRN: SE-MF-000005617
- US Food and Drug Administration, reg.no.: 3009143236
- MHRA UK Reg.No.: 2021121301226985
- Australia ARTG ID reg.no: 326611
- Italia NSIS RDM no. 2887426
- NATO stock number NSN 6515640021832
- GMDN: 37520

Non riutilizzare su altri pazienti. Rischio di contaminazione crociata e infezione.

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al prodotto deve essere segnalato al produttore.

Version : R-0001 ITA Gallant Instructions for use - Rev. F, 2026-01-21